

# CLIP 9 VITALITEC

**Le clip de référence**  
*The reference clip*

**Un chargement intuitif**  
*Ease of loading*

**Un applicateur  
à votre main**  
*The perfect fit applicator*



# CLIP 9 VITALITEC



## Le clip de référence

### Titane pur

- Traité pour obtenir le meilleur ratio malléabilité/ tenue.
- Biologiquement inerte, sans mémoire de forme.
- Radio opaque, compatible avec la RMN et l'IRM.

## The reference clip

### Pure titanium

- Annealed to a consistent malleability.
- Biologically inert, no shape memory.
- Radio opaque; non-magnetic for use with MRI or related scanning equipment.



## La barrette


### Un chargement intuitif

- Fixation aisée de la barrette grâce au support adhésif.
- Chargement du clip facilité grâce au design spécifique de la barrette.
- Nombre de clips par barrette adapté à une utilisation rationnelle du nombre de clips par procédure.

## The cartridge

### Ease of loading

- Adhesive backing holds the cartridge securely on any surface.
- Clip soft loading thanks to the specific design of the cartridge.
- Number of clips per cartridge suitable for a rational use of the number of clips by procedure.

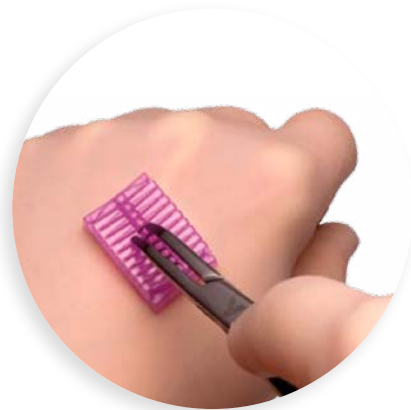

## Un applicateur à votre main

- Gamme pour chirurgie ouverte : longueurs de 15 cm, 20 cm, 28 cm et 28 cm angulés.
- Gamme pour chirurgie laparoscopique : diamètres de type 5 mm, 10 mm et 12 mm.


## Appliers: the perfect fit

- Open surgery range: Length of 15 cm, 20 cm, 28 cm and 28 cm angled models.
- Laparoscopic range: 5 mm, 10 mm and 12 mm diameter.



## Structure interne

- Surface interne entièrement constituée de pointes de diamants qui forment une structure similaire à la surface des mors d'un porte aiguille.
- Tenue multidirectionnelle et sûre du clip sur le vaisseau, sans risque de blessure.

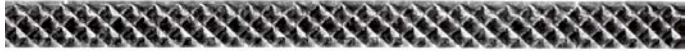

## Internal structure

- Small diamond shape pyramidal heads, similar to needle holder Inserts, ensuring a firm multi-directional atraumatic grip.
- Interlocking atraumatic teeth designed for non-slip closure on the vessels.



## Section triangulaire

- Précision de placement du clip dans les mors de l'applicateur grâce à la forme triangulaire du fil de titane.

## Triangular shape wire

- The triangular shape of the titanium wire improves the precision of the positioning of the clip into the jaws of the applicator.



Grand Large



Moyen/Grand Medium/Large



Moyen Medium



Petit/Moyen Small/Medium



Petit Small



Micro Micro



## 6 tailles disponibles, 1 taille exclusive, 6 couleurs

- Parfaite adéquation de la taille du clip avec celle du vaisseau permettant la sécurité de l'hémostase.

## 6 sizes, 1 exclusive size, 6 colour-codes

- More clips sizes to perform the best possible hemostasis for all vessel configurations.



- Ouverture maximale de l'applicateur pour un nettoyage intégral et efficace.
- Maximum opening of the applicators for a full cleaning.




- Traitement spécifique de la surface interne des mors afin de sécuriser la tenue du clip dans son applicateur.
- Specific treatment of the inner surface of the jaws to secure the grip of the clip.



- 6 couleurs associées aux tailles des clips disponibles.
- Colour codes to fit all 6 available clips sizes.

## Barrettes / Cartridges

Taille Size	Référence Reference	Clips/Barrette Clips/Cartridge	Barrettes/Boîte Cartridge/Box	Clips/Boîte Clips/Box	Hauteur clip fermé Height clip closed
Micro Micro	W9060	9	20	180	2.6 mm
Petit Small	J9180	9	20	180	3.6 mm
Petit/Moyen Small/Medium	L9180	9	20	180	4.7 mm
Moyen Medium	B9180	9	20	180	5.6 mm
Moyen/Grand Medium/Large	V9120	6	20	120	9.0 mm
Grand Large	O9120	6	20	120	12.3 mm

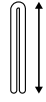

\* Autres références : nous contacter

\* Other references : contact us

## Applicateurs / Appliers

Taille Size	15 cm	20 cm	28 cm	28 cm angulés 28 cm angled
Forme des mors/Jaws shape				
Micro Micro	PW615	PW620		
Petit Small	PJ115	PJ120		
Petit/Moyen Small/Medium	PL515	PL520		
Moyen Medium	PB215	PB220	PB228	PBC228
Moyen/Grand Medium/Large		PV320	PV328	PVC328
Grand Large		PO420	PO428	POC428

## Endo applicateurs / Endoscopic appliers

Taille Size	Référence Reference	Ø trocart adapté Required trocar Ø	Longueur Length
Petit Small	LCASLS 1	Type trocart de 5	33 cm
Petit/Moyen Small/Medium	LCASLS 2	Type trocart de 5	33 cm
Moyen Medium	LCASLS 4	Type trocart de 10	33 cm
Moyen/Grand Medium/Large	LCASLS 5	Type trocart de 10	33 cm
Grand Large	LCASLS 6	Type trocart de 12	33 cm

Les CLIPS 9 VITALITEC font partie de la gamme de produits Péters Surgical  
The CLIPS 9 VITALITEC are included in Péters Surgical products line



42 RUE BENOIT FRACHON - 93013 BOBIGNY CEDEX - FRANCE - www.peters-surgical.com  
Tel : +33(0) 1 48 10 62 62 - Fax : +33(0) 1 48 91 22 99 - commercial@peters-surgical.com